


- **Rimuovere l'ago:** con la mano sx tenere ben saldo il port sottocutaneo (vedi fig. 2), con la mano dx sfilare l'ago con movimento verticale e gettarlo in contenitori adeguati (non perforabili).
- **Disinfettare e applicare cerotto** (dopo 30 minuti si può rimuovere).



Fig. 2

La pompa elastomerica non va smaltita nei rifiuti domestici, riportarla presso il servizio all'accesso successivo.

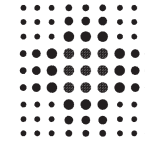

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia

Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova
Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia
Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate
Oncologia

STACCO POMPA DA CATETERE VENOSO CENTRALE TOTALMENTE IMPIANTATO

a cura degli Infermieri dell'Unità Operativa

Gentile paziente queste brevi informazioni le saranno utili per una corretta gestione del catetere venoso centrale quando lo stacco della pompa infusiva (elastomero) non avvenga presso il nostro servizio.

Materiale occorrente (fornito dal servizio)

- **Garza o tamponcino**
- **Soluzione fisiologica o acqua per preparazioni iniettabili (20 ml)**
- Fialetta di soluzione eparinata (250 UI in 5 ml)
- **Una siringa 20 ml**
- **Una siringa 10 ml** (più piccolo è il volume della siringa, più è elevata la pressione che si può generare, per cui è consigliato non utilizzare mai siringhe con volume inferiore a 10 ml)
- **Tappo luer per pompa** (è il tappino di colore rosso contenuto nella confezione trasparente)
- **Un cerottino medicato**
- **Disinfettante** (non fornito)

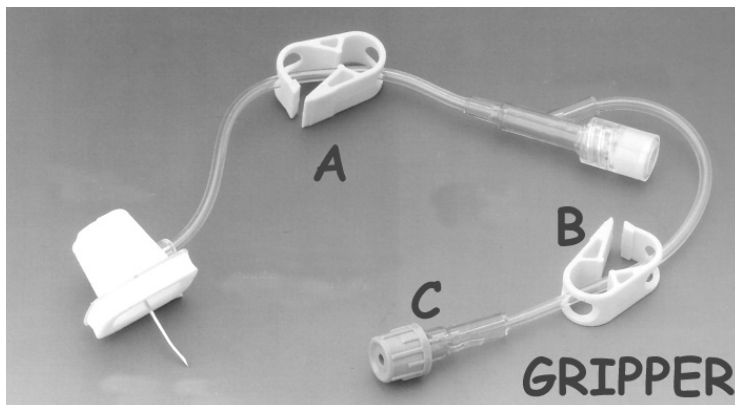


Fig. 1

Tecnica di esecuzione

- **Lavarsi le mani**
- **Chiudere i morsetti dell'ago gripper** (colorati in giallo, vedi Fig. 1 punto A e B)
- **Straccordare la pompa dall'ago gripper** (vedi Fig. 1 punto C), chiuderla con il tappino rosso, e riporla nel sacchetto trasparente in dotazione
- **Raccordare al gripper la siringa da 20 ml** (precedentemente riempita con fisiologica)
- **Aprire i morsetti del gripper ed iniettare la soluzione**
- **Chiudere nuovamente i morsetti, straccordare la siringa 20 ml**
- **Raccordare la siringa 10 ml** (precedentemente riempita con sol. Eparinata)
- **Aprire i morsetti ed iniettare la soluzione**
- **Mantenendo lo stantuffo della siringa premuto chiudere i morsetti** (è importante evitare che ci sia reflusso di sangue all'interno del lume del catetere)
- **Rimuovere la vecchia medicazione**